

KINETEC SPECTRA XL™

Innovatives Design und kraftvoller Antrieb kombiniert mit einer extrabreiten Beinauflage für adipöse Patienten

- 32 cm (12,5 Zoll) breite Beinauflage
- Patientengewicht bis zu 227kg
- Kompatibel mit KINETEC DATA CAPTURE™ Upgrade auf Kompanion Technologie möglich
- Bewegungsmaß von -10° bis 120°



Beinauflage

Die KINETEC SPECTRA XL™ ist weitgehend baugleich mit der KINETEC™ Optima S4 jedoch ist dieses Modell mit einer extra breiten und sehr robusten Beinauflage ausgestattet.

Patientengewicht bis 227 kg

Die 32 cm extra breite Beinauflage (Standard 25 cm) in Kombination mit einem leistungsstärkeren Motor ermöglicht die Mobilisation sehr großer und schwerer Beine.

Feedback für den Patienten

Die Fernbedienung stellt dem Patienten ein präzises Feedback bereit. Des Weiteren kann die Therapie durch nützliche Funktionen wie z.B. Warm-up oder ROM By-Pass unterstützt werden.

USB-Technologie des KINETEC DATA CAPTURE™ Systems

Die Fernbedienung der KINETEC SPECTRA XL™ ist mit der neusten USB-Technologie und der Software KINETEC DATA CAPTURE™ ausgestattet. Für den Patienten kann somit ein kompletter Verlaufsplan vorprogrammiert werden. Ebenso ist jederzeit der aktuelle Fortschritt für den Patienten abrufbar.

Technische Merkmale

- Die breite Beinauflage garantiert eine komfortable Anwendung der Knieschiene und vermeidet Druckstellen am Bein.
- Durch die Tastensperre kann die Programmeinstellung nicht versehentlich verändert werden.
- Die Start- und Stoptaste sowie das Umstellen der Bewegungsrichtung sind immer zugänglich.
- Folgende Bedienmodi und Einstellungen sind möglich: Warm Up, Manueller Modus, ROM By Pass, Timer, Kraft Spasmenschaltung, Pausen Extension und Flexion.
- 2 Jahre Garantie
- Gerät vom Typ BF Schutzklasse II.
- Gleichstrommotor mit Gewindespindeltrieb für lange Lebensdauer.
- Geschwindigkeit: 60° bis 170° pro Minute.



Breite Beinauflage




Fernbedienung

- Gewicht: 13 kg
- Gerätemaße: Länge 94 cm (37 Zoll), Breite 37 cm (14,5 Zoll), Höhe 33 cm (13 Zoll)
- Patientenmaße: Beinlänge: 71 bis 99 cm (30 bis 21 Zoll)
- Tibia: 38 bis 53 cm (15 bis 21 Zoll)
- Femur: 33 bis 46 cm (13 bis 18 Zoll)

Bestell Informationen

- | | |
|--|------------|
| Kinetec Spectra XL™ Deluxe Hygiene Polstersatz | KI21006802 |
| Kinetec Spectra XL™ Komfort Auflagen | KI21006802 |
| zusätzlich +1 Jahr Garantie erweiterbar | KIEXTGAR1G |
| zusätzlich +3 Jahre Garantie erweiterbar | KIEXTGAR3G |

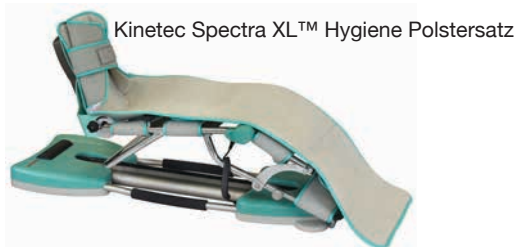

Kinetec Spectra XL™ Hygiene Polstersatz



KINETEC Datenerfassung

- Datenerfassung inkl. USB Stick mit vorinstallierter Software und dazu:
- 5 leere USB Sticks zum speichern von Patientendaten KI70025632
 - 20 leere USB Sticks zum speichern von Patientendaten KI70025640

- Weitere Accessoires
- Transportwagen kompatibel für alle Knie-CPM-Maschinen KI55001053
 - Transportbox KI40001927



Kinetec Spectra XL™ Komfort Auflagen

